


アイリーア[®] 硝子体内注射用キット 40mg/mL の使用方法

● 投与前の注意点

- 本剤は、注射前に未開封の状態です。室温に戻してください。室温に放置した時間が24時間を超えないように使用してください。
- ブリスター包装内は滅菌されているため、組立の準備が整うまで取り出さないでください。
- 目視による確認を行い、注射液に微粒子、混濁又は変色が認められる場合、容器に破損が認められる場合等、異常が認められる場合には使用しないでください。
- 全量投与ではありません。投与量は0.05mLです。詳細は手順4を参照ください。
- 1シリンジは1回（片眼）のみの使用としてください。


● 医療施設でご用意いただくもの（準備）

- 箱に入っている「アイリーア[®]硝子体内注射用キット40mg/mL」を取り出してください。
- 別途30ゲージの眼科用針を準備してください。

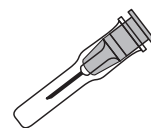

▲ 30ゲージの眼科用針

シリンジを片手に持ち、もう一方の手でシリンジキャップをねじってはずしてください。

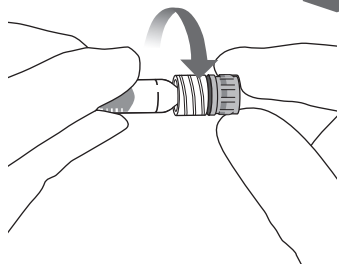


1

注意

シリンジキャップは折らずに、ねじって切り取る。

注射針の先端を上に向けて持ち、シリンジ内の気泡の有無を確認し、気泡が認められた場合には、シリンジを指で軽くたたき気泡を上端まで移動させてください。

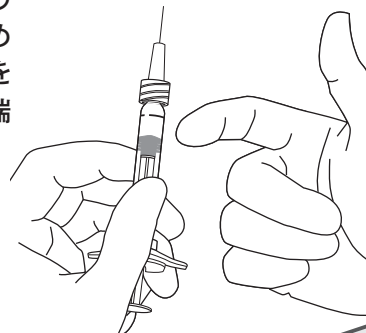


3

全量投与禁止

無菌状態を保つため、プランジャーロッドを引き戻さないこと。

無菌的操作により30ゲージの眼科用針をルアーロックシリンジの先端にねじってしっかりと装着し、投与準備ができたら、注射針のキャップをはずしてください。

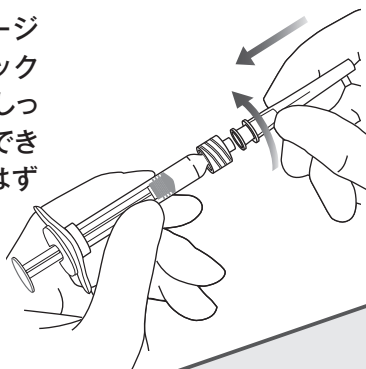


2

気泡と余剰薬液を排出するため、プランジャードーム先端の底面がシリンジに印字された標線（0.05mLに相当）に並ぶまでゆっくりとプランジャーロッドを押してください。

投与前に投与量が0.05mLであることを確認してください。

1シリンジは1回（片眼）のみの使用とすること。

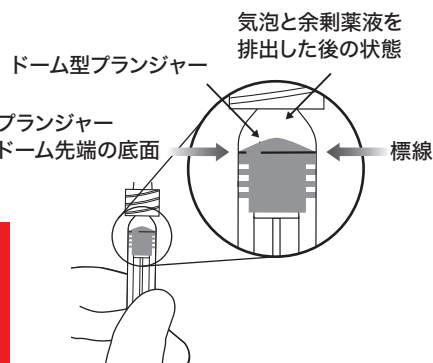

4



Bayer

製造販売元【資料請求先】
バイエル薬品株式会社
大阪市北区梅田2-4-9 〒530-0001
<https://byl.bayer.co.jp/>
【コンタクトセンター】
0120-106-398
<受付時間> 9:00～17:30（土日祝日・当社休日を除く）



発売元
参天製薬株式会社
大阪市北区大深町4-20
文献請求先及び問い合わせ先
製品情報センター