

アイリーア[®]硝子体内注射液 40mg/mL


の使用方法

● 医療施設でご用意いただくもの（準備）

箱に入っている「アイリーア[®]硝子体内注射液40mg/mL」と「専用フィルター付き採液針*」を取り出してください。

別途1mLのシリンジと30ゲージの眼科用針を準備してください。

*：販売名：BD プラントフィルターニードル
届出番号：07B1X00003000138
製造販売業者：日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

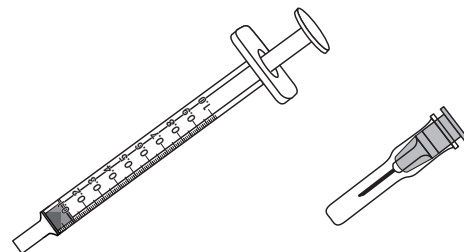

◀ 1mLのシリンジ

▲ 30ゲージの眼科用針

プラスチック製のキャップを取り、バイアルのゴム栓の外側を消毒してください。



1


採液針の中に注射液が残らないよう、プランジャーを十分に引き、シリンジを採液針から取りはずしてください。

採液針をバイアルから取りはずし、適切な方法で廃棄してください。

注意 採液針は硝子体内注射には絶対使用しないこと。


4

箱に同梱された専用フィルター付き採液針（以下、採液針）を滅菌された1mLのシリンジに取り付けてください。

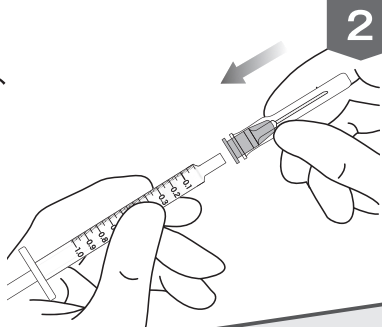

2

無菌的操作により30ゲージの眼科用針をシリンジの先端にしっかりと装着し、投与準備ができれば、注射針のキャップをはずしてください。

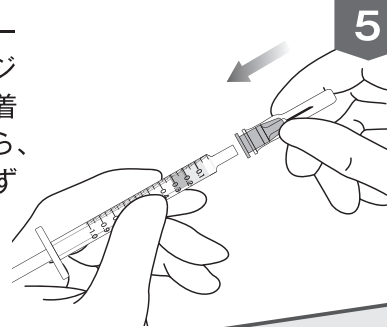


5

採液針をゴム栓の中心部に、針先がバイアルの底に着くまで差し込み、無菌的操作によりバイアル中の注射液全てを吸引してください。

バイアルは正立させ、吸引しやすいように若干傾けてください。

なお、採液針の針先の断面を常に注射液につけた状態にして、シリンジ内に空気が入らないよう注意してください。

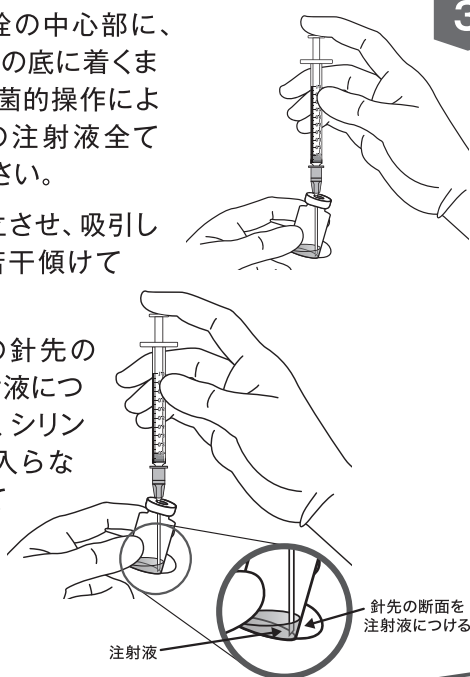

3


注射針の先端を上に向けて持ち、シリンジ内の気泡の有無を確認し、気泡が認められた場合には、シリンジを指で軽くたたき気泡を上端まで移動させてください。

全量投与禁止



6

気泡と余剰薬液を排出するため、シリンジの**0.05mL**の標線に並ぶまでゆっくりとプランジャーを押してください。

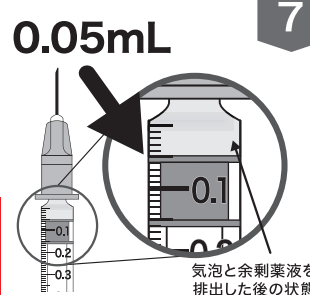

7

1バイアルは1回（片眼）のみの使用とすること。

気泡と余剰薬液を排出した後の状態

製造販売元【資料請求先】

バイエル薬品株式会社
大阪市北区梅田2-4-9 〒530-0001
<https://byl.bayer.co.jp/>

【コンタクトセンター】
0120-106-398
＜受付時間＞ 9:00～17:30（土日祝日・当社休日を除く）



発売元
参天製薬株式会社
大阪市北区大深町4-20
文献請求先及び問い合わせ先
製品情報センター