


# アイリーア<sup>®</sup>硝子体内注射用キット 40mg/mL の使用方法

## ● 投与前の注意点

- 本剤は、注射前に未開封の状態です。室温に戻してください。室温に放置した時間が24時間を超えないように使用してください。
- ブリスター包装内は滅菌されているため、組立の準備が整うまで取り出さないでください。
- 目視による確認を行い、注射液に微粒子、混濁又は変色が認められる場合や、シリンジに破損や緩みが見られる、あるいはシリンジキャップがルアーロックから外れているなど容器に破損が認められる場合等、異常が認められる場合には使用しないでください。
- 本剤の投与量である0.05mL (2mg) より多くの薬液が充填されています。投与前に、プランジャーを標線(0.05mLに相当)に合わせる必要があります。詳細は手順4を参照ください。
- 1シリンジは1回(片眼)のみの使用としてください。


## ● 医療施設でご用意いただくもの(準備)

- 箱に入っている「アイリーア<sup>®</sup>硝子体内注射用キット40mg/mL」を取り出してください。
- 別途30ゲージの眼科用針を準備してください。

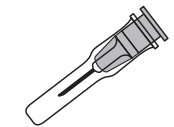

▲ 30ゲージの眼科用針

シリンジを片手に持ち、もう一方の手でシリンジキャップをねじって外してください。

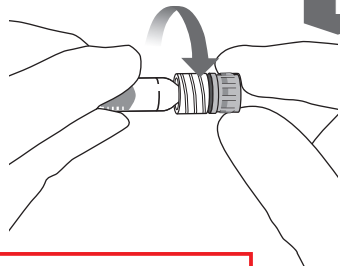


1

注意

シリンジキャップは折らずに、ねじって切り取ることを避けてください。

注射針の先端を上に向けて持ち、シリンジ内の気泡の有無を確認し、気泡が認められた場合には、シリンジを指で軽くたたき気泡を上端まで移動させてください。

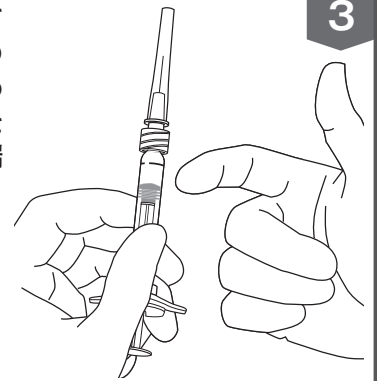


3

全量投与禁止


無菌状態を保つため、プランジャーを引き戻さないこと。

無菌的操作により30ゲージの眼科用針をルアーロックシリンジの先端にねじってしっかりと装着してください。

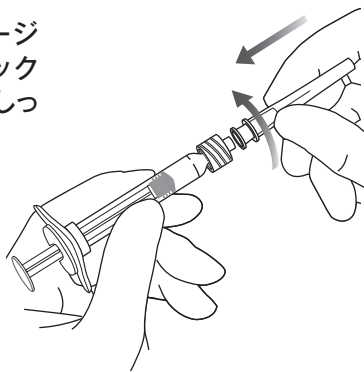

2

気泡と余剰薬液を排出するため、プランジャードームの底面がシリンジに印字された標線(0.05mLに相当; 赤点線に合わせる)に並ぶまでゆっくりとプランジャーを押ししてください。

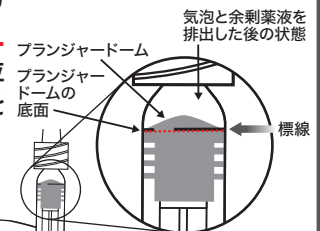

4

1シリンジは1回(片眼)のみの使用とすること。

プランジャーを正確に標線に合わせることは非常に重要です。プランジャーの配置が正確でないと、規定よりも多い又は少ない量が投与される可能性があります。

## ● 投与時の注意点

- 硝子体内に注入する際には、プランジャーを慎重に押し、一定(通常)の圧力で注入します。プランジャーがシリンジの先端に達した後は、追加の圧力を加えないでください。シリンジ内の残留薬液を追加投与しないでください。



製造販売元 [文献請求先及び問い合わせ先]  
バイエル薬品株式会社  
大阪市北区梅田2-4-9 〒530-0001  
https://pharma.bayer.jp  
[コンタクトセンター]  
0120-106-398  
<受付時間> 9:00~17:30(土日祝日・当社休日を除く)



発売元  
参天製薬株式会社  
大阪市北区大深町4-20  
文献請求先及び問い合わせ先  
製品情報センター